

enovis™

CHATTANOOGA®

Linha de Tração





CHATTANOOGA®

ORGULHOSOS DE NOSSO PASSADO. PRONTOS PARA SEU FUTURO.

MAIS DE 75 ANOS



Bruce Spears VP
John Maley Proprietário
Jack Walker Cofundador
Hank Kanies Vendas

1947 Fundado em Chattanooga, Tennessee, pelo treinador de atletismo local Lee Jensen e por seu parceiro de negócios Jack Walker, o Chattanooga Group começou sendo Chattanooga Pharmacal Company



1977 Tração Lançou o primeiro sistema de tração motorizado, a Unidade de Tração TX®



2004 CPM, Cefar Tens e Compex ARTROMOT® CPM, CEFAR® Tens e Compex® adicionados ao portfólio de produtos



2020 Póxima Geração de SW e Eletroterapia GENERATION 2020 É lançada uma nova geração de dispositivos de eletroterapia e RPW



1948 Calor e Frio A Terapia Chattanooga entrou no mercado das terapias de calor e frio com a introdução do Hydrocollator® Moist Heat Steam Pack®



1981 Ecografia Intellect Lançou o primeiro dispositivo Intellect®, a unidade de ecografia Intellect® 200.



2011 Ondas de Choque Entrou no mercado a terapia de Ondas de Choque, que tem sido uma história de sucesso e o principal motor de nosso crescimento em nível internacional



2021 Terapia Laser de Alta Intensidade A DJO adquire a LiteCure, tornando a Chattanooga o maior fabricante e fornecedor do mundo de Laser de Alta Potência

Por que trabalhar com a Enovis?

Chattanooga® é uma marca da Enovis™, que oferece soluções para saúde musculoesquelética, saúde vascular e controle da dor. Os produtos Enovis ajudam a prevenir lesões ou a reabilitar após cirurgias, lesões ou doenças degenerativas, permitindo que os pacientes recuperem ou mantenham seus movimentos naturais.

A Chattanooga é a maior fabricante mundial de equipamentos de reabilitação para o tratamento de distúrbios musculoesqueléticos, neurológicos e de tecidos moles. Há mais de sete décadas, a Chattanooga estabelece um padrão de liderança, confiabilidade e excelência. Nossos produtos contribuem para melhores resultados de tratamento em hospitais, clínicas e ambientes domiciliares em todo o mundo. Lideramos o setor de fisioterapia por exemplo e, por meio da inovação contínua, fornecemos soluções práticas para profissionais de saúde e seus pacientes.

Como marca líder mundial em reabilitação, a Chattanooga é vendida em mais de 80 países. Nossos clientes da Chattanooga contam com o suporte de uma equipe dedicada de funcionários altamente qualificados da Enovis em todo o mundo, desde a realização de pedidos e treinamento até a entrega de produtos e o serviço pós-venda.

Introdução

Em nossos esforços para reduzir o desperdício, estamos minimizando a quantidade de literatura impressa que usamos. Todos os folhetos de produtos estão disponíveis em PDF e podem ser encontrado online ou através de nossas vendas ou equipe de atendimento ao cliente.

Pedido: orders.exp@enovis.com
Marketing e Educação: marketing.exp@enovis.com

[CONTEÚDO]

GALAXY TTET300	9	UNIDADE DE TRAÇÃO TRU-TRAC	15
TRITON DTS 6M	10	DISPOSITIVOS DE TRAÇÃO RESIDENCIAL SAUNDERS	16
TRITON DTS 6E	12	COMPONENTES DO KIT DE TRAÇÃO DTS	17
UNIDADE DE TRAÇÃO TRITON	14	ACESSÓRIOS DE TRAÇÃO	18

WEBSITE



BLOG



LINKEDIN



FACEBOOK



INSTAGRAM



YOUTUBE



Informações práticas

SEU CONTATO PREFERENCIAL
Adicione seu cartão ou suas informações

NOME:

NÚMERO DE TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Segunda a quinta das 8h30 às 17h30
Sexta-feira das 8h30 às 16h30

NÚMERO DE TELEFONE:



FAÇA SEUS PEDIDOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
orders.exp@enovis.com

Tenha ao seu lado:
Código do cliente → (com cada pedido)
→ Código(s) do produto

Informação técnica:
+ 00 33 (0)5 59 52 68 18
support@enovis.com

Serviço Pós-Venda:
contact.sav@enovis.com
+ 00 33 (0)5 59 52 80 90
→ Quantidade para cada produto



DEVOLUÇÕES E TROCAS

- Entre em contato com nossa equipe de operações de vendas em orders.exp@enovis.com e intl.orders@enovis.com antes de devolver qualquer produto sem defeito. O produto devolvido deve estar sem uso e em sua embalagem original.
- Nenhuma devolução será aceita sem uma referência de RMA e nenhum reembolso a condição acima não for respeitada• Entre em contato com nosso Serviço Pós-Venda



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Faça algo pelo planeta e opte por a desmaterialização das suas faturas.
Todas as suas faturas online em enovis.com



GARANTIA

- Nossos produtos têm garantia limitada a partir compra contra defeitos de materiais e mão de obra.
- Entre em contato com nosso Serviço Pós-Venda para mais informações e eventuais instruções de devolução de produtos com defeito em international.products.support@enovis.com



ENVIO E ENTREGAS

	STANDARD	EXCEÇÃO
ENTREGA - MODO DE ENVIO	Para informar no momento da realização do pedido	
LOCAL DE ENVIO	• Para otimizar sua cadeia logística e fornecer suas mercadorias em menor tempo, podemos propor-lhe um envio a partir de armazéns situados em diferentes países we may propose you a shipment from warehouse situated in different countries • Entre em contato com sua equipe de operações de vendas local (França: @ orders.exp@enovis.com / EUA: @ intl.orders@enovis.com) para obter mais informações	
REMESSA	Operações de Vendas de Exportação França Email : orders.exp@enovis.com	Operações de Vendas de Exportação USA Email : intl.orders@enovis.com

O Instituto ENOVIS

Conecte-se à Chattanooga®: beneficie-se da expertise de nossos especialistas e especialistas que estão à sua disposição para otimizar o uso de nossos dispositivos. Descubra o interesse de cada modalidade, combine os efeitos e estabeleça os protocolos clínicos adaptados ao manejo das diferentes

Ligue para Chattanooga®: beneficie-se da expertise de nossos especialistas e especialistas que estão à sua disposição para otimizar o uso de nossos dispositivos.Descubra o interesse de cada modalidade, combine os efeitos e estabeleça os protocolos clínicos adaptados ao manejo das diferentes indicações.



Os usuários do Instituto Enovis também podem acessar uma biblioteca de pesquisa clínica e científica, além de webinars e recursos adicionais projetado para dar suporte ao aprendizado e ao desenvolvimento.

QUAIS CURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS?

Existem cursos sobre Terapia de Fotobiomodulação, Terapia por Ondas de Pressão Radial, Terapia por Ondas de Choque Focadas, Terapia Ultrassom e Estimulação Elétrica, entre muitos outros. Você encontrará uma lista de todos os cursos disponíveis no catálogo do The Enovis Institute.

RECEBEREI UM CERTIFICADO?

A maioria dos cursos termina com um teste/exame, cuja conclusão bem-sucedida é reconhecida com um certificado concedido por e-mail.

COMO ME INSCREVER NO INSTITUTO ENOVIS?

Inscriva-se através do código QR:



História

A tração espinhal existe desde a antiguidade, com os primeiros usos registrados por Hipócrates (460-377 a.C.). O método foi posteriormente expandido com o uso da chamada tabela de Sambucy e Mathieu, ou Sambuma.

A tração passiva é uma técnica que visa aplicar duas forças em direções opostas à coluna vertebral, no eixo da coluna (ou direção próxima). A tração passiva pode ser exercida pelo terapeuta, pela gravidade ou por um sistema mecânico potencialmente motorizado.

A tração motorizada é utilizada há anos. Seu objetivo é aplicar uma força de tração motorizada com o objetivo de alongar o suporte ativo (músculos) e a estrutura (ligamentos, discos intervertebrais) da coluna vertebral no tratamento de dores nas regiões lombar e cervical. A tração é realizada utilizando unidades de tração motorizada que replicam protocolos de tração padrão, de acordo com as forças, velocidades e passos convencionalmente utilizados.

Efeitos

- MECÂNICA**

 - Alongamento de ligamentos e músculos
 - Diminuição da pressão do disco
 - Alargamento do forame intervertebral
 - Alívio das compressões nervosas
- FISIOLÓGICO**

 - Muscle and joint mobilization
 - Improved circulation
 - Pain relief

Indicações clínicas para terapia de descompressão

- ALGIA ESPINHAL COMUM E RADICULALGIA DE ORIGEM DISCAL**
- Dor nas costas resultante de hérnia de disco, inflamação ou protrusão discal
 - Dor discogênica
 - Dor nas articulações
 - Espondilose
 - Distúrbios das articulações facetárias
 - Conflito disco-radicular
 - Hipomobilidade
 - Fraturas por compressão
 - Espasmos musculares
 - Radiculopatia cervical

Introdução à descompressão

- Tratamento eficaz para dor nas costas em sentido amplo
- Muito poucas contraindicações
- Associação com outras terapias +++

Bibliografia

- Effectiveness of an Extension-Oriented Treatment Approach in a Subgroup of Subjects With Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. Browder, Childs, Cleland, Fritz Physical Therapy, Volume 87, No. 12, pp. 1608-1618 Dec 2007 San Antonio, Texas, USA
- Mechanical effects of traction on lumbar intervertebral discs: A magnetic resonance imaging study. Chow DH, Yuen EM, Xiao L, Leung MC Musculoskelet Sci Pract. 2017 Mar 20;29:78-83. Mar 2017 Department of Health & Physical Education, The Education University of Hong Kong, Hong Kong
- Herniated Lumbar Disks: Real-time MR Imaging Evaluation during Continuous Traction. Chung TS, Yang HE, Ahn SJ, Park JH. Radiology. 2015 Jun;275(3):755-62. Jun 2015 Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea
- The Effects of Stretching with Lumbar Traction on VAS and Oswestry Scales of Patients with Lumbar 4-5 Herniated Intervertebral Disc. Yang HS, Yoo WG J Phys Ther Sci. 2014 Jul;26(7):1049-50. Jul 2014 Hanseo University, Republic of Korea; Inje University, Republic of Korea
- Exercise Only, Exercise with Mechanical Traction, or Exercise With Over-Door Traction for Patients With Cervical Radiculopathy With or Without Consideration of Status on a Previously-Described Subgrouping Rule: A Randomized Clinical Trial. Fritz JM, Thackeray A, Brennan GP, Childs JD J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Feb;44(2):45-57 Jan 2014 University of Utah, Department of Physical Therapy and Clinical Outcomes Research Scientist, Intermountain Healthcare, Salt Lake City, UT
- The efficacy of lumbar extension traction for sagittal alignment in mechanical low back pain: a randomized trial. Diab AA, Moustafa IM. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Jan 1;26(2):213-20. Jan 2013 Basic Science Department, Faculty of Physical therapy, Cairo University, Cairo, Egypt
- Is There a Subgroup of Patients With Low Back Pain Likely to Benefit From Mechanical Traction? Fritz, Lindsay, Matheson, Brennan, Hunter, Moffit, Swalberg, Rodriguez Spine, Volume 32, No. 26, pp. E793-800 Dec 2007 Utah, USA

Encontre a lista dos nossos estudos clínicos em <http://intranet.djo.eu>

Técnicas e dosagem

4 fases: Pré-tensão, Progressão, Tração, Regressão

Tração estática ou intermitente

Parâmetros: Força aplicada (kg), Velocidade, Passos, Tempo de acordo com a aplicação cervical/lombar e grau de cronicidade

Protocolo

Estático na fase aguda e depois intermitente

Força: Baixa no início e depois aumenta progressivamente durante a sessão e de uma sessão para a outra

Exemplo

TRAÇÃO LOMBAR

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROGRESSÃO
SINTOMAS	+++ DOR CONTRAÇÃO	+++ DOR RIGIDEZ	+ DOR e MOBILIDADE	DOR MÍNIMA	
Pretensão	11 kg - 60 sec	11 Kg - 30 sec	13 kg - 30 sec	13 kg - 20 sec	ÿ Kg - ÿ Time
Velocidade	30%	30%	50%	100%	ÿ velocidade
Progresso	Degraus estáticos	Degraus estáticos	Degraus estáticos	Etapas int. ou stat	ÿ Movimento
- Número de passos	6-9	6-8	4-6	3-5	ÿ passos
- Tempo de espera	12-15 sec	12-15 sec	12-15 sec	12-15 sec	Manutenção igual
Tração	estático	Intermitente	Intermitente	Intermitente	ÿ movimento
- Tempo	5-8 min	8-10 min	10- 12 min	12- 15 min	ÿ Tempo
- Kg máx.	13-18 kg	18-22 kg	22-38 kg	27-38 kg	ÿ Kg
- Tempo máximo de espera N/A	N/A	45-60 sec	45-60 sec	0-5 sec	ÿ Tempo de espera
- Kg min	N/A	9-13 kg	13-18 kg	20-29 kg	ÿ Kg
- Tempo mínimo de espera N/A	N/A	30-45 sec	15-30 sec	0-5 sec	ÿ Tempo de espera
Regressão	Degraus estáticos	Degraus estáticos	Degraus estáticos	Degraus estáticos	ÿ Movimento
- Número de passos	5	5	4	3	ÿ passos
- Tempo de espera	30-45 sec	30-45 sec	30-45 sec	30-45 sec	Manutenção igual

LINHA DE TRAÇÃO



CHATTANOOGA
GALAXY TTET300 TRACTION TABLE



INDICAÇÕES

A Galaxy TTET300 é uma mesa de tração multifuncional de 3 seções que, em conjunto com uma unidade de tração, auxilia no tratamento eficiente de tração vertebral. A superfície com roletes do TTET300 ajuda a prevenir o atrito abaixo dos quadris e das pernas, auxiliando na aplicação de força de tração total durante o tratamento vertebral. Além disso, como as seções com roletes podem ser travadas, esta mesa de tração de altura variável também pode servir como uma mesa de tratamento adicional.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura tipo tesoura com quatro pés e quatro rodas retráteis multidirecionais para facilitar o transporte
- Proporciona o máximo conforto ao paciente nas posições prona e supina, auxiliando tanto na terapia manual quanto na terapia de tração
- A superfície com roletes ajuda a prevenir o atrito abaixo dos quadris e das pernas
- A seção reposicionável da cabeça/costas eleva-se até 82°
- A mola a gás auxilia nas seções móveis sem atrito para facilitar o posicionamento
- O sistema HalloTronic® permite o ajuste elétrico de altura de 57 a 102 cm com capacidade de até 200 kg
- Almofada e estofamento - 1 ano.
- Estrutura da base e motor - 2 anos.

*Pacote de pino Axilia opcional para maior estabilidade para seu paciente.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
326310XX	Galaxy TTET300 Electr. 2 rodas
326410XX	Galaxy TTET300 Electr. 4 rodas
326610XX	Galaxy TTET400 Electr. F/S (S2/F0)
326710XX	Galaxy TTET400 Electr. F/S (S2/F4)

(X) OPÇÕES DE CORES DE ESTOFAMENTOS

Beige (x = 101)	azul (x = 102)	cinza (x = 106)
cinza grafite (x = 107)	preto (x = 108)	azul marinho (x = 103)

Ao fazer o pedido, substitua o "X" no número da peça pelo código de cor de 2 dígitos desejado acima. 3267101 = Galaxy TTET300, bege

AVISO: As tabelas de cores são produzidas dentro das limitações da impressão litográfica colorida e servem apenas como um guia geral.

(Y) OPÇÕES DE CABO DE ALIMENTAÇÃO

(y = EU) Europa (y = ISR) Israel

(y = US) Estados Unidos

Ao fazer o pedido, substitua "y" no número da peça pelo código do país desejado acima. Por exemplo, 3267101EU = Galaxy TTET400, Bege, Cabo de alimentação UE

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÕES DE ENVIO	235 x 95 x 80 cm
PESO	225 Kg
PESO DE ENVIO	250 Kg

CHATTANOOGA

MESA DE TRAÇÃO TRITON DTS® 6M

CARACTERÍSTICAS

- A mesa de tratamento de 6 seções oferece o máximo conforto ao paciente em posições prona e supina para auxiliar na terapia manual e de tração
- A seção de inclinação pélvica pode ser ajustada de 0° a 20° para auxiliar na flexão da coluna lombar e ajudar a resolver a assimetria pélvica
- A peça da cabeça pode ser reposicionada de 30° a +40° para permitir fácil acesso à coluna torácica e cervical
- Barras de apoio retráteis para tração suspensa sem restrição torácica
- A seção das pernas é ajustável de 0° a 45°
- As molas a gás auxiliam no movimento sem atrito das seções da cabeça, pélvica, peito e pernas, que são facilmente acessíveis de ambos os lados da mesa
- O controlador de pé/mão permite um ajuste fácil da altura da mesa e inclui um mecanismo de segurança com trava
- Gama completa de acessórios para atender às necessidades de cada paciente



TRITON DTS® 6M O ORIGINAL REDESENHADO

Composta por 6 seções, a mesa de tração Triton DTS 6M usa uma combinação de molas a gás e energia elétrica para auxiliar no ajuste manual, permitindo fácil controle do posicionamento da mesa. Cada seção é ajustável, proporcionando uma variedade de opções de posicionamento do paciente. Juntamente com a Unidade de Tração Triton, o Triton 6M é uma escolha sólida para a base da prática de qualquer terapeuta.



GARANTIA

Garantia de 3 anos para o chassi e motor, 2 anos para o estofamento. Os reparos só podem ser realizados pelo fabricante ou por um serviço técnico por ele aprovado.

Triton DTS®
Unidade de
tração vendida
separadamente

Axila Anatômica

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÃO DE ENVIO	235 x 95 x 80 cm
PESO	195 Kg
PESO DE ENVIO	220 Kg

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
----------------	-----------

4769M1xy Triton DTS® 6M traction table

OPÇÕES DE CORES DE ESTOFAMENTOS

Azul (x = 02)

Preto (x = 08)

Ao fazer o pedido, substitua o "x" no número da peça pelo código de cor de 2 dígitos desejado acima. Por exemplo, 4769M102 = Triton 6M, azul

AVISO: As tabelas de cores são produzidas dentro das limitações da impressão litográfica colorida e servem apenas como um guia geral.

(Y) OPÇÕES DE CABO DE ALIMENTAÇÃO

(y = EU) Europa

(y = ISR) Israel

(y = US) Estados Unidos

Ao fazer o pedido, substitua "y" no número da peça pelo código do país desejado acima. Por exemplo, 4769E102EU = Triton 6E, azul, cabo de alimentação europeu.

KIT DE TRAÇÃO DTS SEMG

4767	Triton DTS® Advanced com o pacote de acessórios sEMG vem com unidade de tração 4798
A 2825	Cinto Quikwrap DTS
B 42901	Conjunto de reforço DTS
C 7040	Saunders Clínico Cervical TRC
D 2842	Cartão Multimídia DTS

COMPONENTES DO KIT DE TRAÇÃO DTS



CHATTANOOGA

MESA DE TRAÇÃO TRITON DTS® 6E

CARACTERÍSTICAS

Com uma seleção de recursos sofisticados, a Triton 6E emprega tecnologia moderna para ajudar os médicos a assumirem o controle total com o toque de um botão. Totalmente elétrica e altamente ajustável, quando combinada com uma de nossas unidades de tração Triton, esta mesa premium ajuda a fornecer o melhor suporte possível para profissionais que buscam ir além. seu tratamento de tração para o próximo nível de inovação.




CARACTERÍSTICAS

- Uma das mesas de tração elétrica mais avançadas, alimentada por 6 atuadores modernos, auxilia na movimento sem atrito das seções da cabeça, pélvica, tórax e pernas
- O controle remoto manual idealmente posicionado permite fácil acesso ao redor da mesa
- Mesa de tratamento de 6 seções para proporcionar o máximo conforto ao paciente em posições prona e supina para terapia manual e de tração
- A seção de inclinação pélvica pode ser ajustada de 0° a 20° para auxiliar na flexão da coluna lombar e ajudar a resolver a assimetria pélvica
- A peça da cabeça pode ser reposicionada de -30° a +40° para permitir fácil acesso ao tórax e coluna cervical
- Sistema de iluminação LED atmosférica em estrutura de mesa, com modos cíclico ou fixo
- Barras de apoio retráteis para tração suspensa sem restrição torácica
- Almofadas aquecidas proporcionam maior conforto ao paciente
- Fácil de transportar e fixar no lugar
- Gama completa de acessórios para atender às necessidades de cada paciente



OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Sistema de iluminação LED para personalização. Modos cíclico ou fixo.

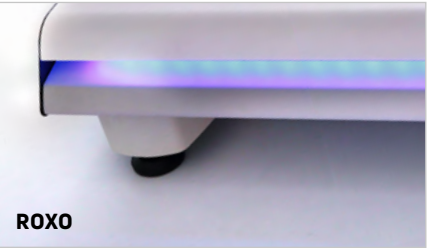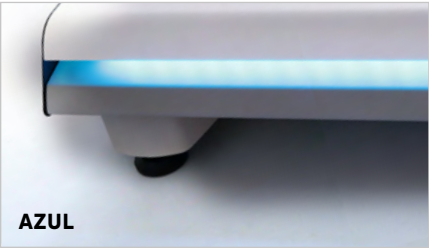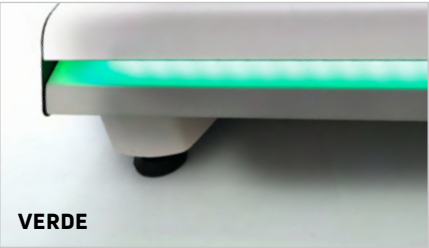

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÕES DE ENVIO	235 x 95 x 80 cm
PESO	225 Kg
PESO DE ENVIO	250 Kg

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
----------------	-----------

4769E1xy	Triton DTS® 6E
----------	----------------

OPÇÕES DE CORES DE ESTOFAMENTOS

Preto / Cru (x = 10)	Cinza grafite (x = 07)
Azul (x = 02)	Preto (x = 08)

Ao fazer o pedido, substitua o "x" no número da peça pelo código de cor de 2 dígitos desejado acima. Por exemplo, 4769E102 = Triton 6E, azul

AVISO: As tabelas de cores são produzidas dentro das limitações da impressão litográfica colorida e servem apenas como um guia geral.

(Y) OPÇÕES DE CABO DE ALIMENTAÇÃO

(y = EU)	Europa
(y = ISR)	Israel
(y = US)	Estados Unidos/Canadá

Ao fazer o pedido, substitua "y" no número da peça pelo código do país desejado acima. Por exemplo, 4769E102EU = Triton 6E, azul, cabo de alimentação europeu.

GARANTIA

Garantia de 3 anos para o chassi e motor, 2 anos para o estofamento. Os reparos só podem ser realizados pelo fabricante ou por um serviço técnico por ele aprovado.



CHATTANOOGA
UNIDADE DE TRAÇÃO TRITON®



- CARACTERÍSTICAS**
- Tração estática, intermitente e cíclica
 - Temporizadores independentes permitem fácil personalização de puxadas de tração em fases progressiva, regressiva e de tração
 - Motor de velocidade variável (30%, 50% e 100%)
 - A etapa de pré-tensão facilita a tração do paciente para evitar a proteção muscular e pré-testar a tolerância do paciente à força de tração
 - Protocolos clínicos fornecidos para condições cervicais e lombares
 - Biblioteca gráfica completa em cores, incluindo tutorial visual de técnicas de aplicação de cintos, imagens anatômicas e patologias comuns.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
4749	Unidade de tração Triton (incluindo interruptor do paciente e cartão de dados)
48083	Interruptor de interrupção do paciente - Azul
27465	Cartões de Dados do Paciente (1x)
48144	Manual do usuário em CD
4766	O módulo sEMG inclui:
48084	Patient Interrupt/sEMG Indicator Switch
27321	Fio de derivação sEMG
42192	Eletrodos redondos DuraStick® Plus de 5 cm (4x)
42205	Eletrodos redondos DuraStick® Premium de 3 cm (4x)

- Tela sensível ao toque digital colorida de alta resolução que gira 270
- 80 slots de protocolo definidos pelo usuário
- Armazene facilmente parâmetros de tratamento, escalas de dor e mapas de dor em Cartões de dados do paciente
- Módulo sEMG com acessórios
- 5 padrões de tração do Sistema de Tração por Descompressão (DTS) que simulam a tração manual.
- Garantia de 2 anos

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
Triton Traction Unit w/ EMG	
4798	Unidade de tração DTS Triton com sEMG (incluindo módulo sEMG, interruptor do paciente e cartão de dados)
27465	Cartões de Dados do Paciente (1x)
48144	Manual do usuário em CD
48084	Interruptor indicador de interrupção do paciente/EMG
27321	Fio de derivação EMG
42192	Eletrodos redondos DuraStick® Plus de 5 cm (4x)
42205	Eletrodos redondos DuraStick® Premium de 3 cm (4x)

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÕES	45 x 24 x 45 cm
PESO	14 kg

CHATTANOOGA
UNIDADE DE TRAÇÃO TRU-TRAC



- CARACTERÍSTICAS**
- Tração estática, intermitente e cíclica
 - Tempos de espera, repouso e tratamento definidos pelo usuário
 - 10 slots de protocolo definidos pelo usuário para armazenar configurações personalizadas
 - Interface de tela sensível ao toque monocromática digital que gira 270°
 - Armazene facilmente parâmetros de tratamento, escalas de dor e mapas de dor em Cartões de dados do paciente
 - Garantia de 2 anos



INFORMAÇÃO DE PEDIDO

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
4779	Unidade de tração TRU-TRAC (incluindo troca de paciente e cartão de dados)
48082	Interruptor de interrupção do paciente - Cinza
27465	Cartões de Dados do Paciente (1x)
48144	Manual do usuário em CD

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÃO	45 x 24 x 45 cm
PESO	14 kg



CHATTANOOGA
SAUNDERS® HOME
DISPOSITIVOS DE TRAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- Uma alternativa à cirurgia para alguns pacientes
- As forças de tração são direcionadas para a parte posterior da cabeça para evitar compressão da ATM
- O manômetro de fácil leitura fornece controle total da força em todos os vezes
- A válvula de escape limita a quantidade de força que pode ser aplicada
- A superfície livre de atrito do Lumbar HomeTrac garante movimentos suaves
- O design inovador do Saunders Cervical Home Traction replica tração clínica e promove a consistência do tratamento em ambiente domiciliar ou na clínica
- As alternativas de posicionamento do Cervical Home Traction permitem variações opções de tratamento para o clínico

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
TRAÇÃO CERVICAL SAUNDERS	
199594	Tração Cervical Saunders®
700723	Alça de cabeça e almofadas
199614	Bomba manual cervical
700724	Ajustador de ângulo
96458	Bolsa de ombro
360365	Guia do usuário

- O sistema pneumático patenteado garante precisão de força confiável e desempenho sem vazamentos.
- O design de mesa bipartida e a superfície de tratamento com movimento ativo do HomeTrac lombar replicam a tração clínica e promovem a consistência do tratamento.
- As cunhas de pescoço autoajustáveis patenteadas garantem um ajuste perfeito no Tração Cervical Domiciliar Saunders
- O design patenteado da bomba incorpora um simples “clique no lugar” mecanismo
- A configuração rápida e simples do paciente permite a tração domiciliar sem assistência
- cintos antiderrapantes do Lumbar Home Trac prendem confortavelmente o paciente o dispositivo
- Garantia de 1 ano

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
B SAUNDERS LUMBAR HOMETRAC	
199603	Saunders Lumbar HomeTrac
199633	Bomba Manual Lombar
14-9964	Estojo de transporte e arreios
360369	Guia do usuário
70066-001	Arnês superior
700667-001	Arnês inferior

CHATTANOOGA
COMPONENTES DO KIT DE TRAÇÃO DTS



CINTO QUIKWRAP DTS
SISTEMA

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2825	Cinto Quikwrap DTS System



CONJUNTO DE ALMOFADAS
DE APOIO DTS

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
42901	Conjunto de reforço DTS



SAUNDERS CLÍNICA TRC
CERVICAL

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
7040	Saunders Clinical TRC cervical



CARTÃO MULTIMÍDIA DTS

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2842	Cartão Multimídia DTS



CHATTANOOGA

ACESSÓRIOS DE TRAÇÃO



CONJUNTO DE CINTOS
QUIKWRAP

CARACTERÍSTICAS
Ajuste universal, para uso com aplicações de tração pélvica ou lombar de até 136 kg


NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2825	Conjunto de cintos QuikWrap



SUPORTES AXILARES

CARACTERÍSTICAS
Os suportes axilares removíveis ajudam a fornecer fixação adicional à mesa, evitando deslizamentos durante a tração em decúbito dorsal.

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
01-STOX0703-003	Pinos Anatômicos Axilares Pretos (x2) 15x32 cm

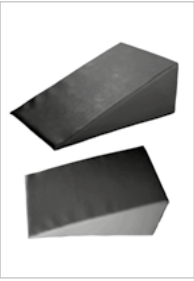

CUNHA (1 POR PACOTE)

CARACTERÍSTICAS
Formas de posicionamento de superfície plana em dois tamanhos - 30x40x12 ou 50x35x20 cm

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3714*	30x40x12 cm
3715*	50x35x20 cm



BOLSTER SEMI-REDONDO

CARACTERÍSTICAS
Formas de posicionamento semi-arredondadas em dois tamanhos - 60x15x10 cm ou 60x15x15 cm

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3716-xx	Almofada 23,6x6x4 polegadas
3717-xx	Almofada 23,6x6x6 polegadas

(x) opções de cores de cunha e reforço



SUORTE DE JOELHO

CARACTERÍSTICAS
Oferece posição corporal ideal para auxiliar em diversas aplicações de tratamento.

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
42901	Joelheira



SUPORTES AXILARES

CARACTERÍSTICAS
Os suportes axilares removíveis ajudam a fornecer fixação adicional à mesa, evitando deslizamentos durante a tração em decúbito dorsal.

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
83215ME	Poste Axial de Tração, Preto (x2) 10x32



ALMOFADA REDONDA

CARACTERÍSTICAS
Formato de posicionamento arredondado em tamanho único: 15x60 cm

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3718*	Almofada redonda 15x60 cm

(X) OPÇÕES DE CORES DE ESTOFAMENTOS

Beige (x = 101)	Azul (x = 102)	Cinza (x = 106)
Cinza grafite (x = 107)	Preto (x = 108)	Azul-Marinho (x = 103)

AVISO: As tabelas de cores são produzidas dentro das limitações da impressão litográfica colorida e servem apenas como um guia geral.

Para fazer o pedido, utilize o número do modelo, o hífen e a cor do estofamento, conforme indicado na tabela acima. Ao fazer o pedido, substitua o *x* no número da peça pelo código de cor definido acima.



CUNHA KALTENBORN

CARACTERÍSTICAS
Para uso por profissionais treinados em técnicas de mobilização manual

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
371308	Cunha Kaltenborn



BANCOS PNEUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS
Bancos terapêuticos de alta qualidade com assento giratório de espuma de 60 Kg/m3, suporta 150Kg

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
371901	Banco Standard Bege
371902	Banco Standard Azul
371906	Banco Standard Cinza
371907	Banco Standard Cinza Grafite
371908	Banco Standard Preto
371919	Banco Standard Azul Imperial
372001	Banqueta Flexi Bege
372002	Banqueta Flexi Azul
372006	Banqueta Flexi Cinza
372007	Banqueta Flexi Cinza Grafite
372008	Banqueta Flexi Cinza Preta
372019	Banqueta Flexi Azul Imperial



PRON PILLO®

FEATURES
Eleva a cabeça e os ombros para maior conforto. A base elevada permite que os pacientes em decúbito ventral respirem com mais facilidade

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
4206	Pron Pillo®



TRAVESSEIRO FACIAL

CARACTERÍSTICAS
Oferece suporte à cabeça e ao pescoço do paciente para sessões de tração mais confortáveis

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
4291	Travesseiro Facial



TRACTION FLEXION STOOL

CARACTERÍSTICAS
Altura ajustável, permitindo a colocação da coluna lombar do paciente em posição neutra ou flexionada para maior conforto. O estofamento pode ser coordenado com a cor da mesa de tração.

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3265101	Bege
3265102	Azul
3265106	Cinza
3265107	Cinza Grafite
3265108	Preto
3265119	Azul Imperial



CHAVES DE SEGURANÇA

FEATURES
Chave de segurança pessoal removível para segurança e posicionamento da mesa.

NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
15-0127	Chave de Segurança

CHATTANOOGA®

enovis™

Creating Better Together™

chattanoogarehab.com

2000 Cathedral Square, Cathedral Hill, Guildford, Surrey, GU2 7YL, UNITED KINGDOM

Os resultados individuais podem variar. Nem a Enovis, DJO, LLC nem nenhuma de suas subsidiárias fornecem aconselhamento médico. O conteúdo deste documento não constitui aconselhamento médico, jurídico ou de qualquer outro tipo profissional. Em vez disso, consulte seu profissional de saúde para obter informações sobre os tratamentos, se houver, que podem ser apropriados para você.

©Enovis Export - MKGEXPRS3 - Rev A - 04/2025

Copyright© 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation